

Contour[®] plus ONE[»]

Kan Şekeri Takip Sistemi

CONTOUR®DIABETES uygulamasıyla kan şekeri şablonlarını görüntüleme



Tedavi, diyet veya egzersizinizde değişiklik yapmadan önce daima
Sağlık Profesyonelinize danışın.



Contour®
plus ONE»
Kan Şekeri Takip Sistemi

Şablonlarım özelliđi, kan řekeri ölçümlerinizde belirli řablonları ve trendleri tanımlar ve sizi bunların ardında yatan olası sebepler hakkında bilgilendirir.




Contour
plus ONE
Kan Şekeri Takip Sistemi

1. Şablonlar

CONTOUR® DIABETES

uygulaması bir şablon saptadığında **Şablon Takibi** mesajı alırsınız.

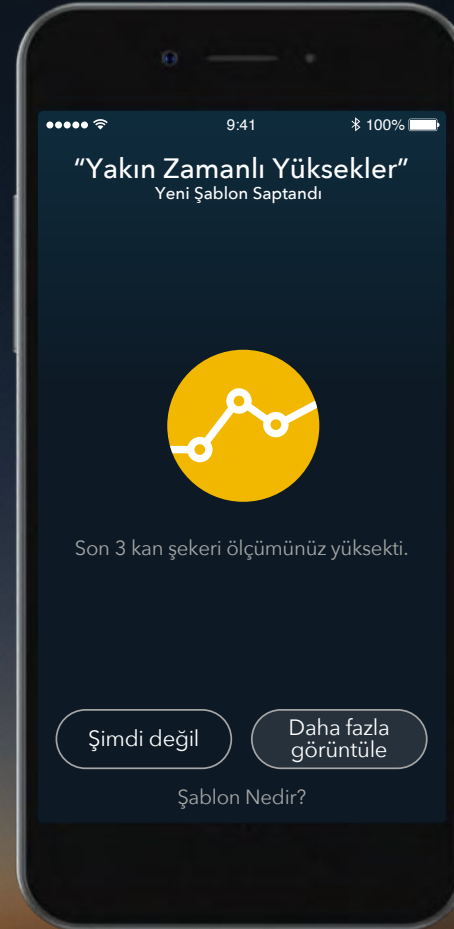


Contour®
plus ONE»
Kan Şekeri Takip Sistemi

1. Şablonlar

CONTOUR® DIABETES

uygulaması bir şablon saptadığında **Şablon Takibi** mesajı alırsınız.

Şablon hakkında daha fazla bilgi almak için **Daha Fazla Gmtle** seçeneğine dokununuz.

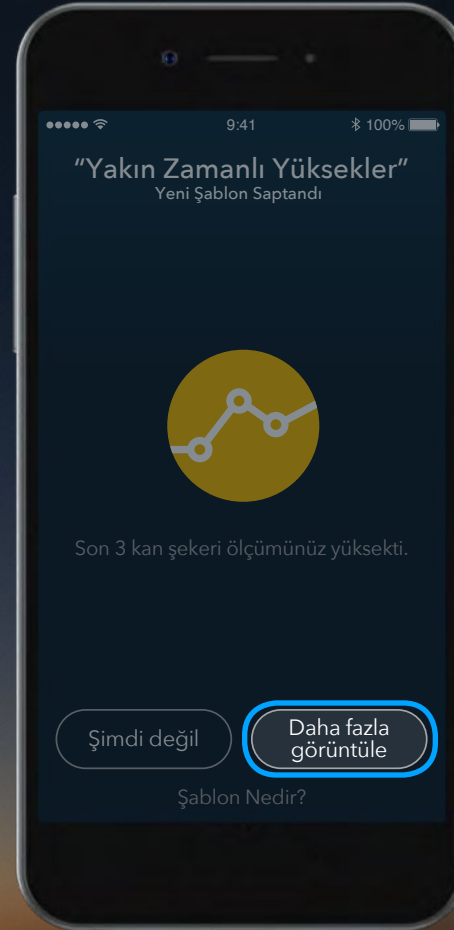


Contour®
plus ONE»
Kan Şekeri Takip Sistemi

2. Şablonlar

Yakın Zamanlı Yüksekler

şablonu, size son 3 kan şekeri ölçümünüzün hedef aralığınızın üzerinde olduğunu söyler.

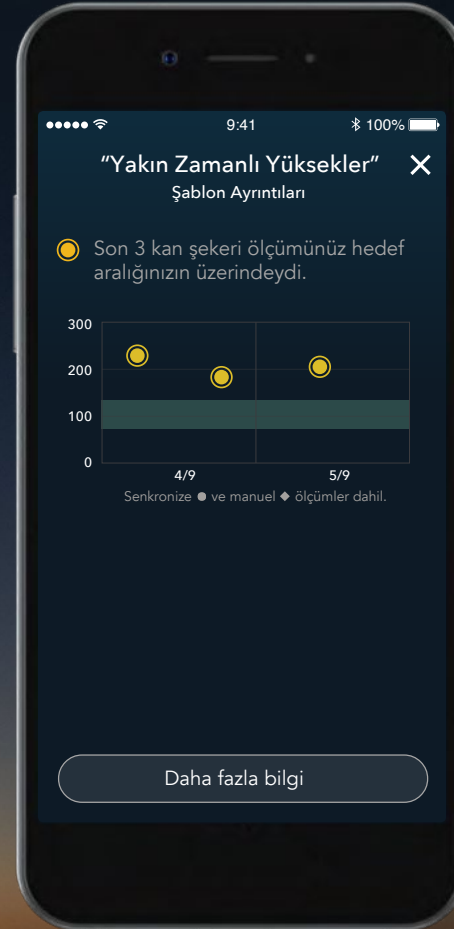

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

2. Şablonlar

Yakın Zamanlı Yüksekler

şablonu, size son 3 kan şekeri ölçümünüzün hedef aralığınızın üzerinde olduğunu söyler.


Olası nedenler hakkında bilgi almak için **Daha fazla bilgi** seçeneğine dokununuz.



Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

3. Şablonlar


Yüksek kan şekeri ölçümlerinizin nedenini biliyorsanız buradan seçebilirsiniz.

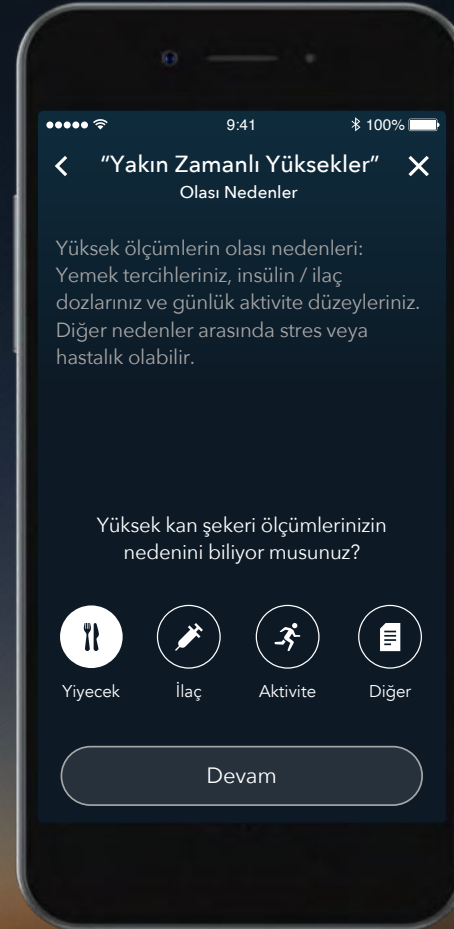

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

3. Şablonlar


Yüksek kan şekeri ölçümlerinizin nedenini biliyorsanız buradan seçebilirsiniz.

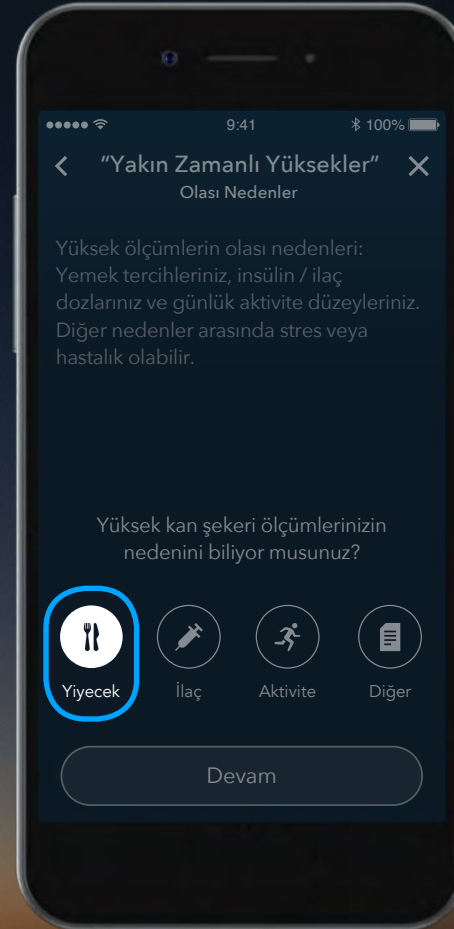

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

4. Şablonlar

CONTOUR®DIABETES
uygulaması, bu şablonun olası
nedeni hakkında bazı bilgiler verir.

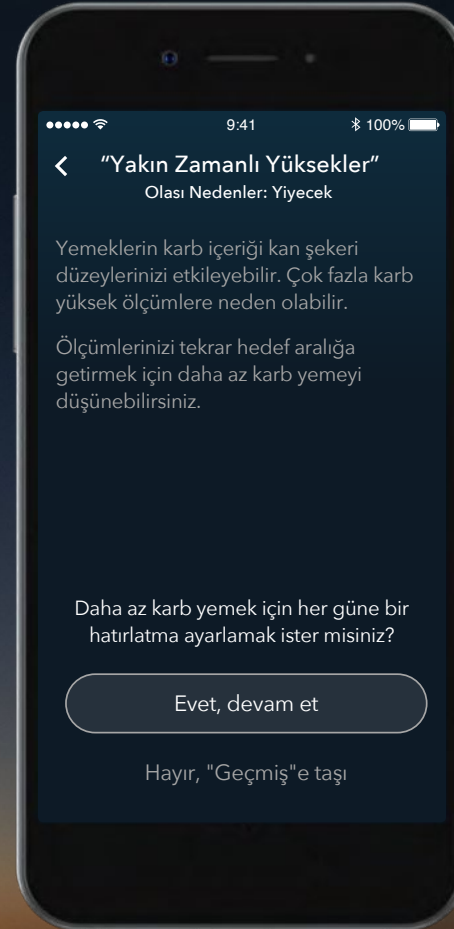


Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

4. Şablonlar

CONTOUR®DIABETES

uygulaması, bu şablonun olası nedeni hakkında bazı bilgiler verir.


Evet, devam et seçeneğine dokunun ve her gün daha az karbonhidrat tüketmek için bir hatırlatma ayarlayın.

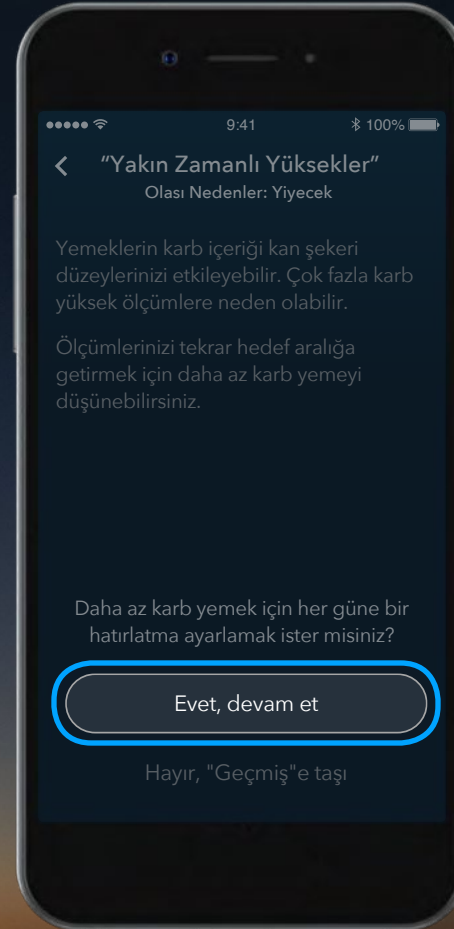

Contour®
plus ONE»
Kan Şekeri Takip Sistemi

5. Şablonlar

Her gün daha az karbonhidrat tüketmek için hatırlatma alacağınız zamanı seçmek üzere ekrandaki döner saati kullanın.

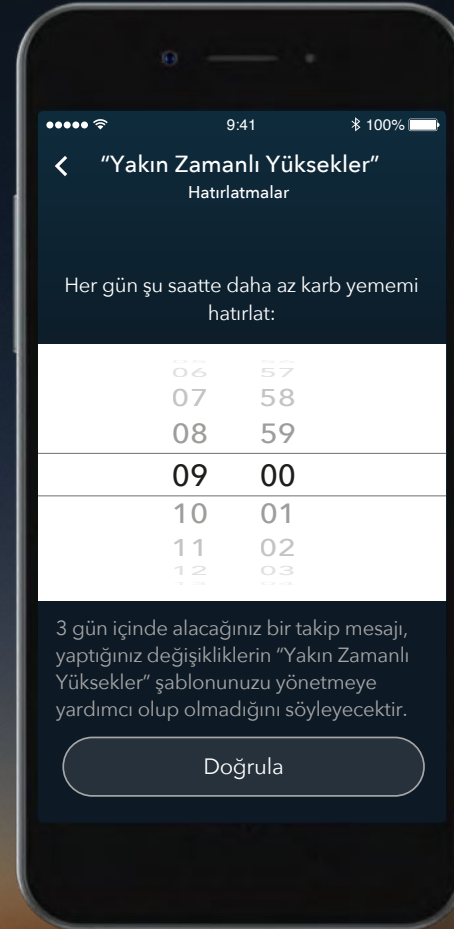


Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

5. Şablonlar

Her gün daha az karbonhidrat tüketmek için hatırlatma alacağınız zamanı seçmek üzere ekrandaki döner saati kullanın.


Zamanı ayarlamak için **Doğrula** seçeneğine dokununuz.

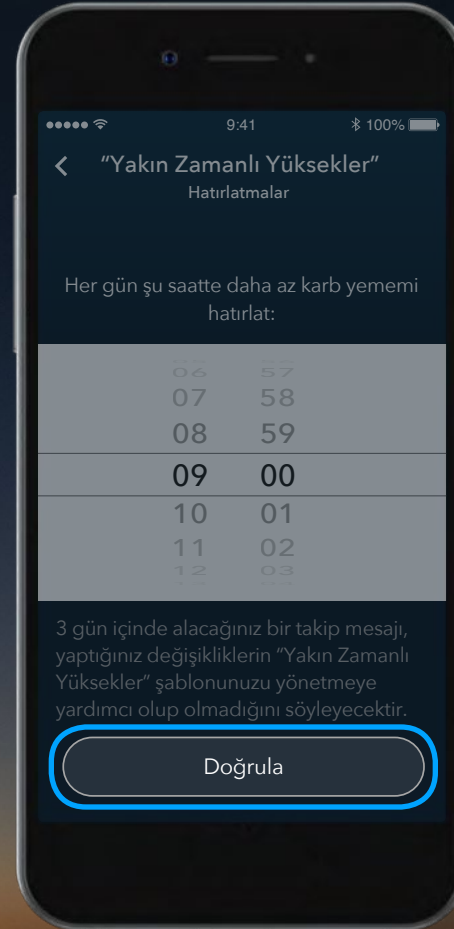

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

6. Şablonlar


Seçtiğiniz zamanda bir hatırlatma görüntülenir.

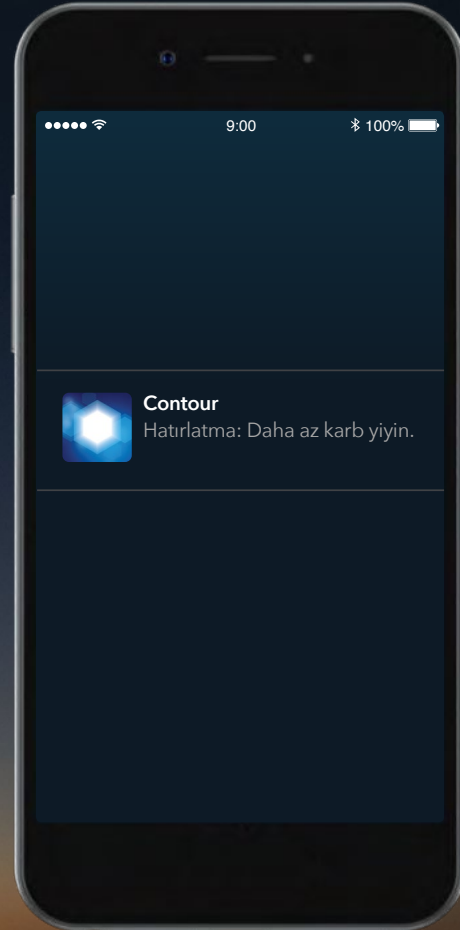

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

6. Şablonlar

Seçtiğiniz zamanda bir hatırlatma görüntülenir.

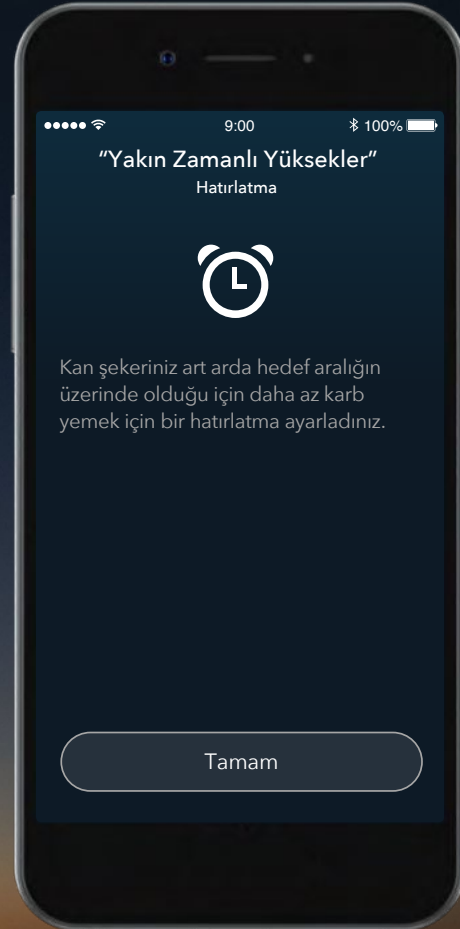

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

7. Şablonlar

3 gün içerisinde yaptığınız değişiklikler, **Yakın Zamanlı Yüksekler** şablonuna yardımcı olmuşsa, bir takip mesajı alırsınız.




Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

7. Şablonlar

3 gün içerisinde yaptığınız değişiklikler, **Yakın Zamanlı Yüksekler** şablonuna yardımcı olmuşsa, bir takip mesajı alırsınız.


Daha fazla bilgi almak için **Daha Fazla Görüntüle** seçeneğine dokununuz.

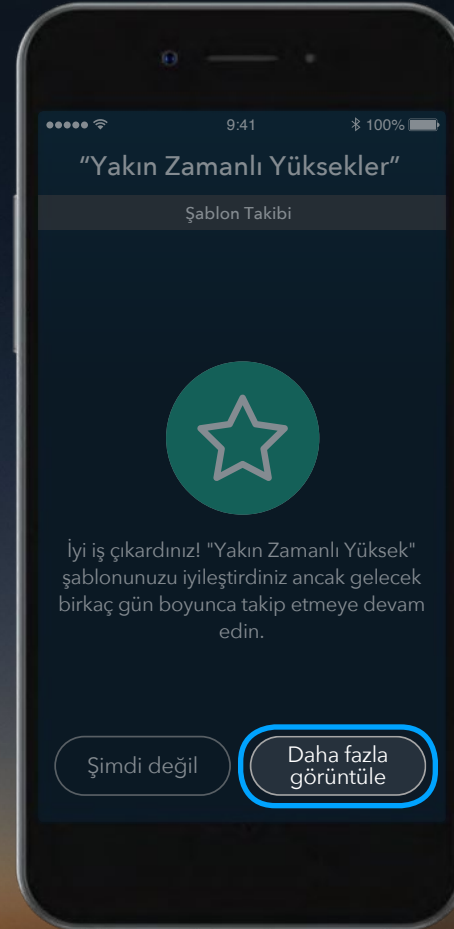

Contour
plus ONE
Kan Şekeri Takip Sistemi

7. Şablonlar


Bu şablon geçmişinize taşınır ve **Ana Menü** içerisindeki **Şablonlarım** seçeneği içerisinde istediğiniz zaman görüntülenebilir.

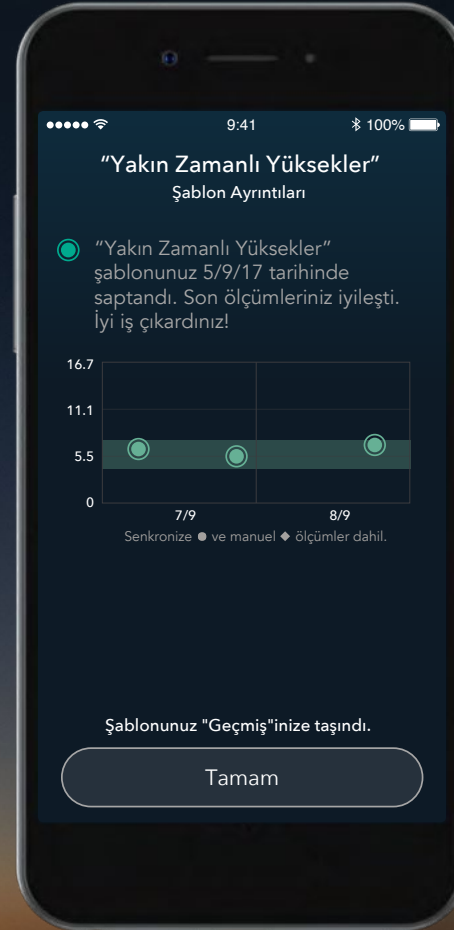

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

8. Şablonlar


Gelecekteki Sağlık Profesyoneli randevunuzda size yardımcı olması için şablonun olası nedenleri hakkında ilave notlar eklemek istediğinizde şablonunuza dilediğiniz zaman **Geçmiş Şablonlar**'dan ulaşabilirsiniz.

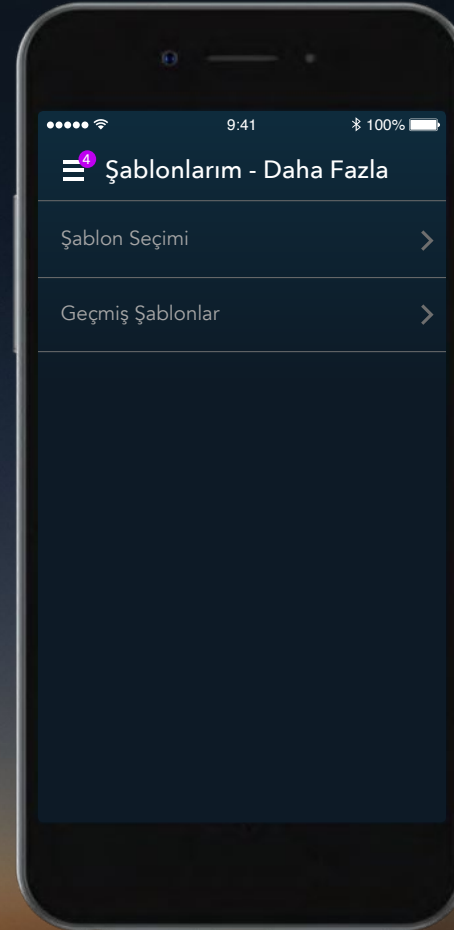

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

8. Şablonlar

Gelecekteki Sağlık Profesyoneli randevunuzda size yardımcı olması için şablonun olası nedenleri hakkında ilave notlar eklemek istediğinizde şablonunuza dilediğiniz zaman **Geçmiş Şablonlar**'dan ulaşabilirsiniz.

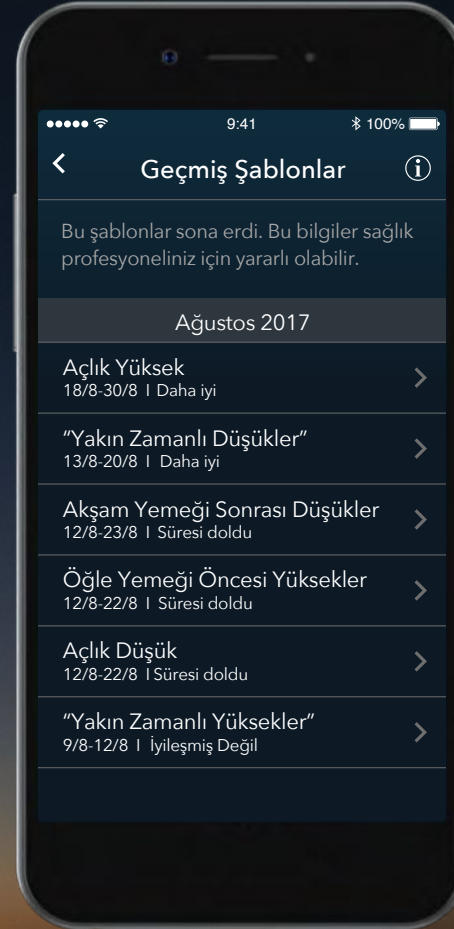

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

CONTOUR®PLUS ONE akıllı ölçüm cihazı veya **CONTOUR®DIABETES** uygulaması hakkında sorunuz varsa Sağlık Profesyonelinizle görüşün ve ürün kullanma kılavuzuna bakın.

Daha fazla bilgi almak ve bu ürünlerin ülkenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için diabetes.ascensia.com adresini ziyaret edin.



Yalnızca gösterme amaçlı varsayımsal hasta verileri.
Tedavi, diyet veya egzersizinizde değişiklik yapmadan önce daima Sağlık Profesyonelinize danışın.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'nin bir hizmet markasıdır. Bluetooth sözcük işareti ile logoları, Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve bu markalar, burada lisans kapsamında kullanılmıştır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Ascensia, Ascensia Diabetes Care logosu ve Contour, Ascensia Diabetes Care Holdings AG şirketinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Hazırlanma tarihi: Şubat 2018 Kod: G.DC.10.2017.52579



Contour®
plus ONE
Kan Şekeri Takip Sistemi

Contour[®]
diabetes solutions